

Tandheelkundige uitmuntendheid
op elk gebied.



Apparatuur voor in de praktijk

Behandeleenheden en -lampen, tandartsstoelen, systemen voor communicatie met de patiënt, tandheelkundige microscopen en aanvullende bedieningsaccessoires van KaVo, speciaal voor u als tandheelkundig expert.



Instrumenten

Tandheelkundige handstukken en hoekstukken, turbines, polijsthandstukken en kleine apparaten voor diverse toepassingsgebieden; van diagnostiek en profylaxie tot restauratie, endodontie en onderhoud van instrumenten.

De producten, functies en diensten die in deze catalogus zijn weergegeven en beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar. Alle informatie in dit document is gebaseerd op de informatie die beschikbaar was ten tijde van het ter perse gaan van dit document. KaVo Dental GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in kleur of vorm ten opzichte van de afbeeldingen, fouten en drukfouten en behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan de brochures aan te brengen. Herdrukken, inclusief uittreksels, zijn alleen toegestaan na goedkeuring van KaVo Dental GmbH.

PROPHYflex 4
Zo wordt polijsten leuk.



Focus Open 2018 Gold

Uitstekend productontwerp
De KaVo PRO PHYflex 4 heeft de Focus Open 2018 Gold-award voor het uitmuntende en toekomstbestendige ontwerp gekregen. De jury prees de frisse kleuren en de manier waarop het handstuk in de hand ligt.

Drie handstukken in één: perfect voor supragingivale en subgingivale toepassingen.

De nieuwe PROPHYflex 4: met dit alles-in-een apparaat kunt u haast toveren. Of u nu in het supragingivale of het subgingivale gebied werkt, het apparaat kan voor alle tanden, alle patiënten en bij bijna alle indicaties worden gebruikt.

Supragingivaal.




Ligt fijn in de hand.

Voor uitgebalanceerde, stressloze en ergonomisch verantwoorde behandelingen kiest u de handstukgrootte die het beste bij u past.



Volledige flexibiliteit.

Twee supragingivale tips voor een uitzonderlijk zachte tot zeer krachtige reiniging. Kies voor elke behandeling tussen de standaard tip en de nieuwe Power-tip.

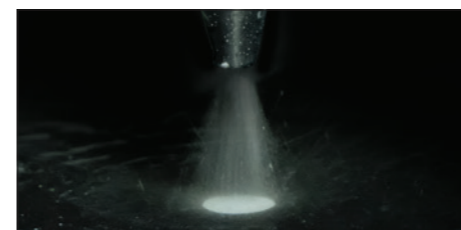

Tevredenheid: daar draait het om.

Het homogene en geconcentreerde polijsten van de PROPHYflex -standaard tip beschermt de tandstructuur en vermindert de polijstnevel aanzienlijk.



Aanpasbaar vermogen.

Dankzij de drie opties kunt u zelf de mate van reiniging kiezen: van poedervrij tot maximale reinigingskracht.

Subingivaal.



Geen biofilm meer.

Dankzij de geconcentreerde straal kunt u met zeer grote precisie werken en dankzij de markering die gelijk is met uw pocketsonde, heeft u altijd goed overzicht over de pocket.



Een fijn alles-in-een-instrument dankzij de geconcentreerde straal.

De periotip is bedoeld voor subgingivale toepassingen, maar kan ook worden gebruikt om implantaten, kronen en bruggen te reinigen en verkleuringen op blootliggende tandhalzen te verwijderen.

Perfekte ergonomie met ongeëvenaarde flexibiliteit ...

Zou het niet fijn zijn als de dagelijkse profylaxiebehandelingen (ook de langere!) makkelijker, sneller, grondiger en nog prettiger verliepen? Met de nieuwe Kavo PROPHYflex 4 kan het. Zomaar wat kernwoorden: superlicht, perfect uitgebalanceerd en een ergonomisch ontwerp. Zo kunt u gewoon lekker aan de slag.

De PROPHYflex-standaard tip.

Minder storende polijstnevel dankzij zeer nauwkeurig polijsten voor een subtiele, beschermende verwijdering van biofilm en verkleuringen. De smalle tip geeft de gebruiker een beter zicht tijdens supragingivale reiniging.

De Het PROPHYflex Perio-accessoire.

De optionele Perio Kit voor een gerichte en milde subgingivale behandeling en voor het reinigen van bruggen, implantaten en kronen.

De PROPHYflex Power-tip.

De Power-tip verwijdert zelfs in een mum van tijd hardnekkige verkleuringen.



... flexibiliteit was nog nooit zo ergonomisch verantwoord.

Omdat elke hand, elke behandeling en elke patiënt anders is, kan de KaVo PROPHYflex 4 hieraan worden aangepast. U beslist, of u in subgingivale of supragingivale gebieden werkt, of u milde of ernstige verkleuringen wegwerkt en hoe lang het handstuk moet zijn.

Voor u op maat gemaakt.

Twee opzetstukken van verschillende lengtes, zodat het apparaat perfect in de hand ligt. Ook heel handig wanneer verschillende collega's met hetzelfde handstuk werken. Werk dankzij de 360° draaibare huls comfortabel op zelfs moeilijk bereikbare plaatsen.

Blijf ontspannen en werk met gemak.

Een superlicht, perfect uitgebalanceerd handstuk dat op verschillende lengtes kan worden ingesteld voor een comfortabel gebruik en stressvrije behandeling.

Veilig op alles voorbereid.

Vullen en veilige plaatsing dankzij een vlak oppervlak. De poedercontainer kan van tevoren worden gevuld en verzegeld met een rubberen verzegeling waarop de indicatie staat. Zo hoeft u de behandeling niet te onderbreken.

Drie is gewoon beter.

Er zijn drie opties; de eerste is tandenreiniging zonder poeder, om het poederresidu te verwijderen. Opties 2 en 3 kunnen worden gebruikt om de behandeling aan te passen aan de patiënt en de indicatie.

Een aansluiting vinden gaat nu makkelijker.

Keuze tussen een KaVo- of een Sirona-aansluiting.




Aanbevolen door klinici.

“Met de nieuwe PROPHYflex 4 kan ik mijn dagelijkse werkzaamheden nog beter uitvoeren; hij past perfect in de hand en kan naar wens worden aangepast dankzij de twee verschillende griphulzen. Ook kun je de hoeveelheid spuitnevel aanpassen; mijn patiënten vinden dat ook erg prettig.”

Tanja Wicharz

Profylaxie-expert en opleider

Echte tevredenheid.
Voor, tijdens en na de behandeling.

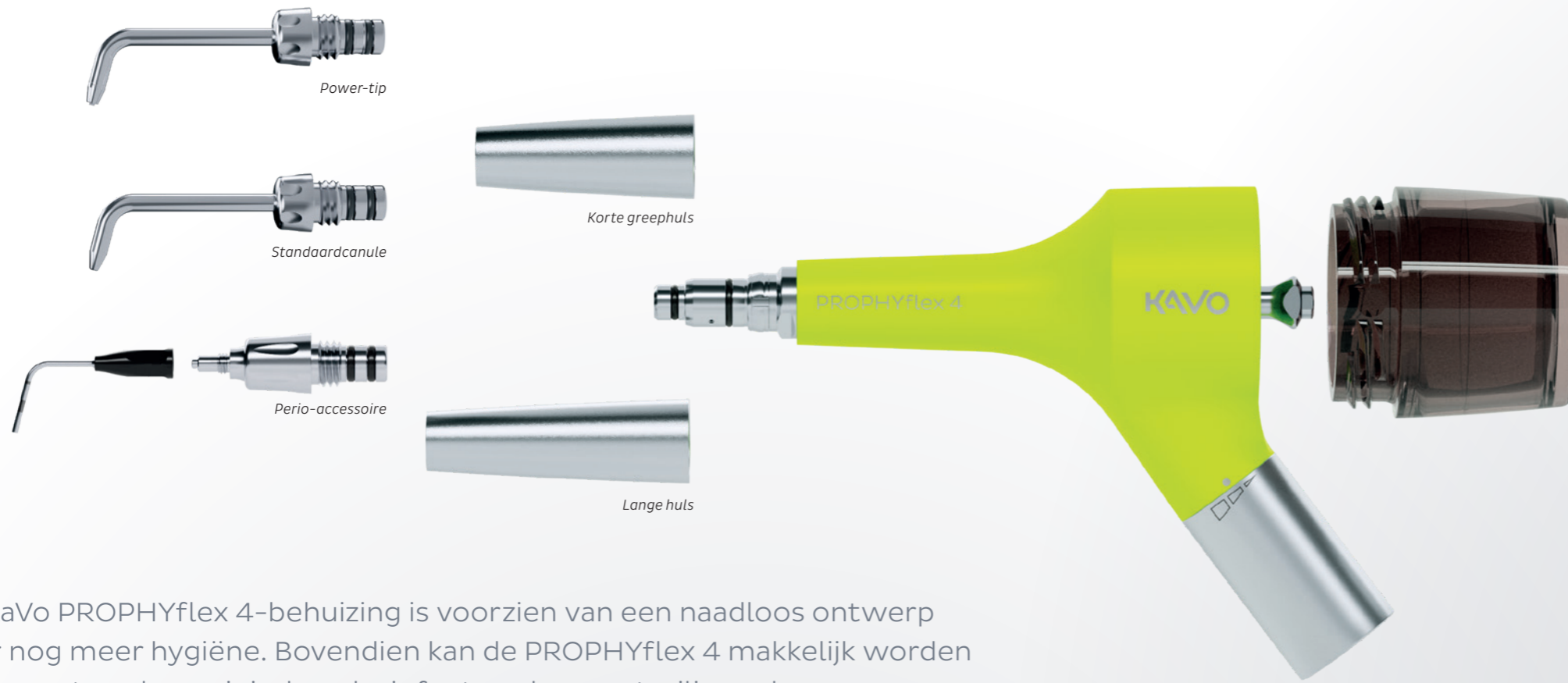

De KaVo PROPHYflex 4-behuizing is voorzien van een naadloos ontwerp voor nog meer hygiëne. Bovendien kan de PROPHYflex 4 makkelijk worden gedemonteerd, gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd.

De PROPHYflex 4 is verkrijgbaar in drie levendige kleuren.

Mijn tip om de betrouwbaarheid van het apparaat nog verder te vergroten.

“Laat de PROPHYflex 4, aangesloten op een turbinekoppeling, na gebruik en voor de herverwerking een minuut draaien met water en daarna zonder water. Zo zorgt u ervoor dat er geen poederresidu achterblijft in de PROPHYflex 4, waardoor deze zou kunnen blokkeren. U kunt ook achtergebleven poederresidu uit het PROPHYflex 4-handstuk blazen door de eerste van de drie opties te gebruiken. Nadat u het apparaat heeft gereinigd en heeft herverwerkt, kunt u het voor de volgende behandeling gebruiken.”




Annett Preuß
Salesspecialist Instrumenten Duitsland bij KaVo Kerr

Andere voordelen:
minder poedernevel.



De instelbare hoeveelheid poeder en het constante, gerichte polijsten met de PROPHYflex-standaard tip zorgen dankzij de nauwkeurige reinigingswerking, minder storende polijstnevel en derhalve ook een geoptimaliseerde hygiëne.

Hard voor vlekken,
zacht voor tanden.

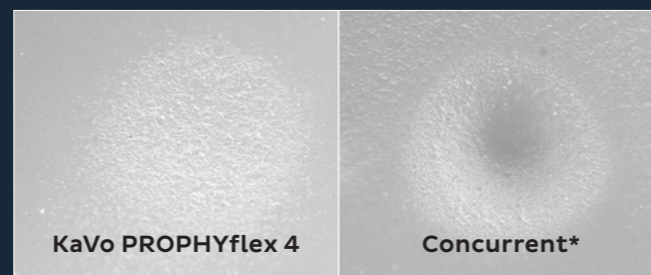

De energie wordt gelijkmatig verdeeld over het spuitoppervlak. Dat is op twee manieren voordelig: hoe gelijkmatiger de straal wordt gespoten, hoe de effectiever de reiniging. Daarnaast wordt de tandstructuur zo beter beschermd.

* Abrasie met PROPHYpearls vergeleken met een polijstapparaat van de concurrent, waarbij calciumcarbonaat wordt gebruikt. Getoond op SonicFill™-composiet.

Drie tips en behandeling op maat voor de patiënt.



Dankzij de drie beschikbare canules en de 3-traps regeling van de PROPHYflex 4 garanderen een behandeling op maat en een verscheidenheid aan klinische toepassingen.

Tijdverspilling is zonde:
verzegelbare poedercontainers.



De poedercontainers worden afgesloten met een deksel: ideaal dus bij de voorbereidingen voor een behandeling waarbij de poederkeuze moet aansluiten bij de indicatie. Het enige dat u hoeft te doen is de vooraf gevulde container aan te sluiten; u kunt meteen daarna aan de slag.


De inhoud is ook belangrijk: reinigingspoeder voor de PROPHYflex 4.

PROPHYpearls, PROPHYflex Powder en PROPHYflex Perio Powder zijn helemaal gemaakt voor de KaVo PROPHYflex 4; daarmee kunt u tanden grondig reinigen, zonder te veel druk te gebruiken.





KaVo PROPHYpearls: voor een algemene reiniging en milde profylaxie.

- Indicatie: effectieve verwijdering van verkleuringen, plak en biofilm.
- Actief ingrediënt: calciumcarbonaat met een deeltjesgrootte van $\text{\O} 60\text{-}70 \mu\text{m}$, biologisch afbreekbaar, zonder zout, suiker of gluten.
- Voordelen: ronde vorm en uniforme afmeting voor een optimale reiniging met minimale abrasie, vier smaken en twee neutrale varianten.

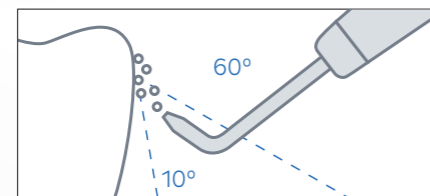


KaVo PROPHYflex Powder: reiniging in een handomdraai.

- Indicatie: zeer effectieve verwijdering van verkleuringen, plak en biofilm.
- Actief ingrediënt: natriumwaterstofcarbonaat met een deeltjesgrootte van $\text{\O} 60\text{-}70 \mu\text{m}$, in water oplosbaar.
- Voordelen: eenvoudige, snelle en effectieve behandeling, beschikbaar in vier smaken.

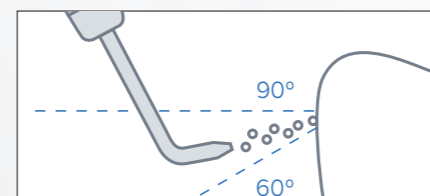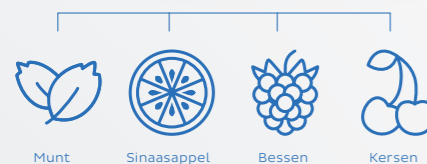

De alleskunner: subgingivale procedures met de PROPHYflex 4.

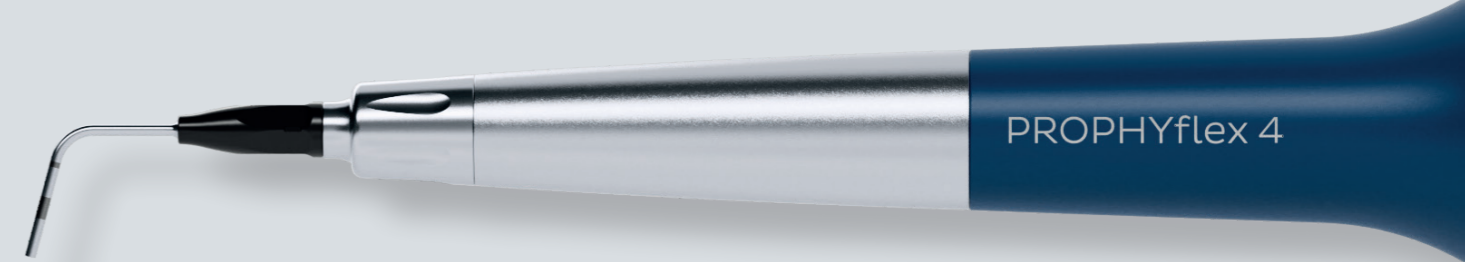

Perio Kit en Perio Powder voor subgingivale procedures.


Met de PROPHYflex 4 heeft u geen ander apparaat meer nodig bij het reinigen van implantaten of wanneer u van een supragingivale behandeling overschakelt naar een subgingivale behandeling. Sluit de periotip aan, vul deze met Perio Powder, kies de juiste prestatieoptie en klaar is Kees.

- Veilige, doelgerichte reiniging van pockets: met de stabiele, dunne periotip met dieptemarkeringen kan het.
- De behandelplek is goed toegankelijk, want het apparaat neemt niet veel ruimte in dankzij het slanke ontwerp.
- Hygiënisch en meerdere keren te gebruiken: elke tip kan worden herverwerkt en tot 10 cycli worden gebruikt.



KaVo PROPHYflex Perio Powder: voor subgingivale en supragingivale behandelingen.

- Indicatie: effectieve beheersing van biofilm in parodontale pockets en de reiniging van kronen, bruggen en implantaten.
- Actief ingrediënt: fijn glycerinepoeder ($18\text{-}22 \mu\text{m}$), beschermt het tandvlees.
- Voordelen: mild, niet sterk abrasief, geschikt voor efficiënte reiniging van pockets en supragingivale toepassingen bij implantaten.

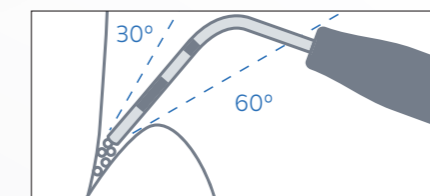

Airpolishing met KaVo PROPHYflex 4: de hoofdrolspeler in de KaVo World of Smile.



Blijdschap is de basis voor een lach: het KaVo-polijstinstrument speelt de hoofdrol in de KaVo Kerr World of Smile. Het ergonomische en makkelijk aanpasbare polijstapparaat KaVo PROPHYflex 4 vormt een perfect team met PROPHYpearls, PROPHYflex Powder en de PROPHYflex Perio Kit en Perio Powder.

Ook met de andere KaVo- en Kerr-producten kunt u voor een prettige behandeling zorgen: van de patiëntvoorbereiding, zodat u goed zicht heeft op de behandelplek, producten voor de milde en toch grondige verwijdering van tandsteen en polijstoplossingen tot innovatieve apparaten voor de vroege detectie van cariës zonder inzet van röntgen.

Alle informatie, video's en nieuwtjes kunt u vinden op: www.kavo.com/PROPHYflex4



Kerr OptiView™ voor patiëntvoorbereiding.

Dankzij het flexibele 3D-ontwerp van de Kerr OptiView kunt u deze snel en gemakkelijk plaatsen en verwijderen. Door de gelijkmatige periorale retractie heeft u goed zicht in de mond en kunt u er ook nog eens goed bij. Zo kunt u ononderbroken en efficiënt werken, zelfs tijdens langere behandelingen. Bovendien is het voor zowel u als de patiënt comfortabel.



The KaVo SONICflex voor het effectief scalen.

Ongeacht welke tip u ook gebruikt voor het verwijderen van tandsteen of een subgingivale reiniging van parodontale pockets of implantaten, de tip van de KaVo SONICflex is eenvoudig en snel te verwijderen. U kunt er comfortabel en met respect voor de behandelplek mee behandelen en bovendien is zo een milde oscillatie voor elke indicatie mogelijk. En last but not least: er wordt minder warmte opgebouwd.



Het KaVo-instrument om eenvoudig mee te polijsten.

Met het KaVo-tandreinigingsinstrument wordt polijsten nog leuker: door middel van het ergonomische en aanpasbare PROPHYflex 4-polijstapparaat, in combinatie met de bijbehorende PROPHYpearls en PROPHYflex Powder of met de PROPHYflex Perio Kit en het Perio Powder, verschijnt er bij u én bij uw patiënten bij elke toepassing een glimlach op het gezicht.



Oplossingen van KaVo Kerr voor het efficiënt polijsten van tanden.

Dankzij het naadloze samenspel van KaVo en Kerr (drieKaVo SMARTmatic-hoekstukken voor profylaxie in combinatie met de Kerr Pro-Cup™ voor een spatvrije toepassing van Kerr Cleanic™ Prophy-Paste op de handige Prophy Clips) kunt u zeer effectief polijsten.



The KaVo DIAGNOcam voor het diagnosticeren van cariës.

Met de KaVo DIAGNOcam voor de vroegtijdige detectie van cariës, kunt u nauwkeurige beelden maken door transilluminatie van de tanden zonder dat er röntgen voor nodig is. Dankzij deze uitstekende beelden is de kans groter dat het behandelplan wordt geaccepteerd.